

Bipedestador DONDOLINO

ref: BK1

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/bipedestadores/bipedestador-dondolino>



El bipedestador DONDOLINO se ha diseñado para su uso en los contextos normales de la vida del niño (casa, escuela, guardería, residencias), aumentando las oportunidades de adaptación activa para integrarse en el mundo que lo rodea.





ESTABILIDAD EN MOVIMIENTO

Dondolino es un bipedestador vertical para niños con necesidades especiales con estructura basculante, diseñado y fabricado por Ormesa para ayudar al niño a adquirir la posición erguida. El uso de Dondolino en contextos de la vida cotidiana facilita la participación activa del niño en el entorno social, favoreciendo la movilidad de los miembros superiores y de la cabeza, en consonancia con el desarrollo motor individual.

Gracias a los tres tamaños disponibles y a una amplia gama de ajustes, Dondolino puede adaptarse:

- Al crecimiento.
- Al desarrollo de las habilidades individuales.
- A las necesidades de flexión de caderas y rodillas.

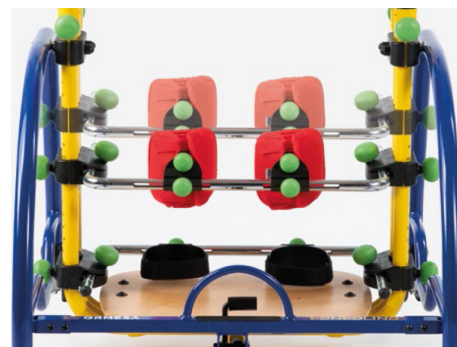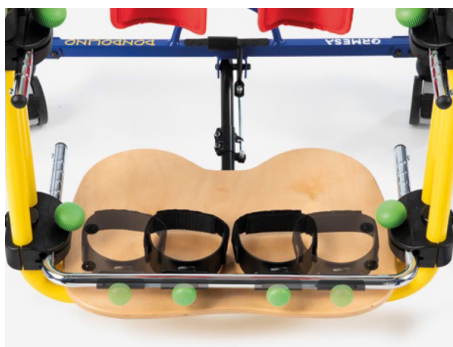


DONDOLINO está formado por:

- Mesa desmontable de madera contrachapada. Regulable en altura, profundidad e inclinación
- Chasis regulable en inclinación.
- Soporte de rodillas regulables en profundidad, anchura, en sentido de rotación y en altura.
- Soporte de talones regulables en profundidad y en anchura.
- Base de madera contrachapada, regulable en altura.
- Soporte pélvico regulable en altura, en sentido antero-posterior y en circunferencia con velcro.
- Soporte axilar (solo para las medidas 2-3) regulable en altura, en sentido antero-posterior y en circunferencia con velcro
- Ruedas diámetro total de 75 mm con frenos.



Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

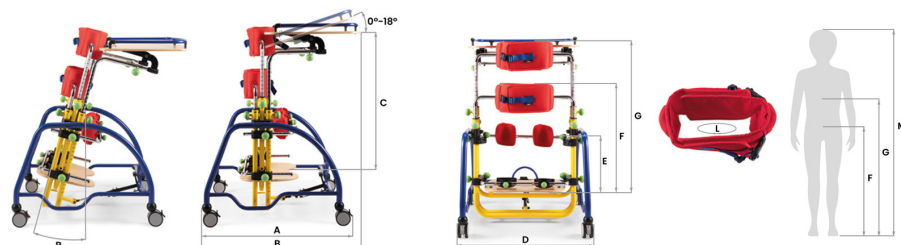

MEDIDAS:

Dondolino medidas y pesos

A: largo de la base

B: largo total

C: altura plataforma - mesa

D: ancho total

E: altura plataforma - rodilleras

F: altura plataforma - soporte pélvico

G: altura plataforma - soporte torácico

L: circunferencia mínima soportes

M: altura usuario

P: inclinación chasis

Peso dispositivo

Carga Máxima

medida 1

63 cm

de 75 a 85 cm

de 45 a 79 cm

63 cm

de 12 a 26 cm

de 39 a 59 cm

de 51 a 76 cm

65 cm

de 75 a 100 cm

de 0° a 18°

24 kg

35 kg

medida 2

77 cm

de 81 a 91 cm

de 52 a 90 cm

67 cm

de 12 a 35 cm

de 47 a 74 cm

de 56 a 90 cm

65 cm

de 90 a 125 cm

de 0° a 14°

24 kg

45 kg

medida 3

83 cm

de 85 a 95 cm

de 52 a 107 cm

71 cm

de 14 a 48 cm

de 58 a 93 cm

de 70 a 110 cm


79 cm

de 120 a 150 cm

de 0° a 18°


29 kg

55 kg

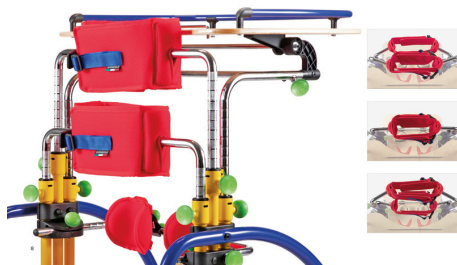

SOPORTE PÉLVICO Y SOPORTE TORÁCICO


Ajustable independientemente en circunferencia, altura y adelante-atrás. Si el usuario tiene suficiente control del tronco, el soporte torácico se puede quitar.

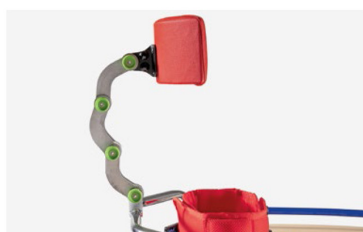

ACCESORIO OPCIONAL

865 Reposacabezas

multirregulable altura, inclinación y adelante atrás ajuste con pomos.

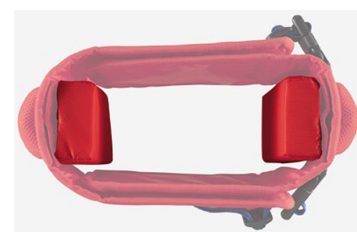

ACCESORIO OPCIONAL

944 Reductores de

circunferencia 3 cm de espesor cada uno. Se pueden insertar en los soportes para usuarios más delgados.